



CERAMENT® BONE VOID FILLER

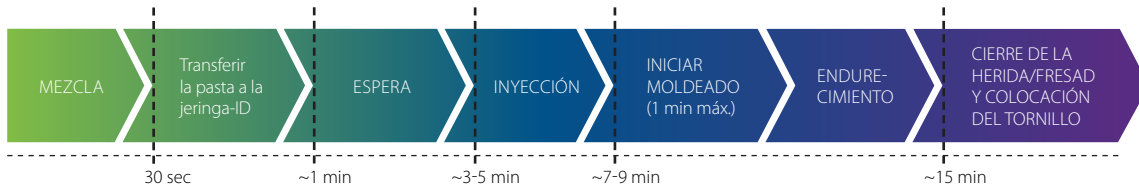


1

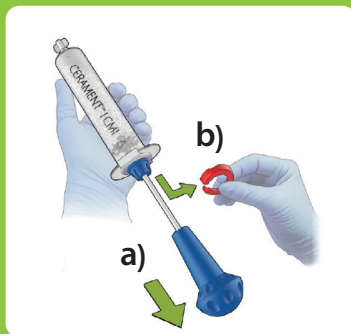


- Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

2

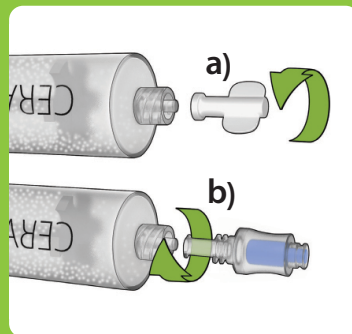

- a) Retire el tapón.
- b) Conecte la válvula con el extremo de la jeringa llena de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.

3

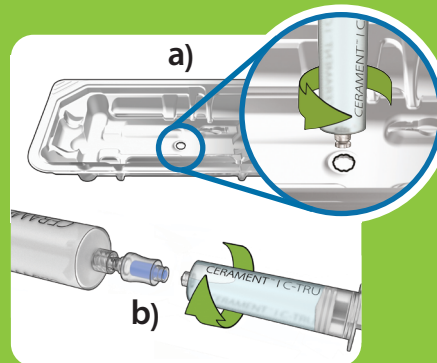


- a) Retire el tapón de la jeringa llena de líquido con la herramienta incrustada en el fondo de la bandeja del blister, empuje y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.
- b) Conecte la jeringa llena de líquido a la válvula azul girándola en el sentido de las agujas del reloj.

4




- Inyecte todo el líquido en la jeringa con el polvo.
- Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
- Desconecte la jeringa de la válvula.

5

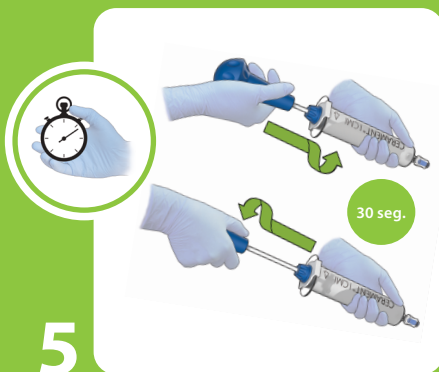


- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
- Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
- Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

6

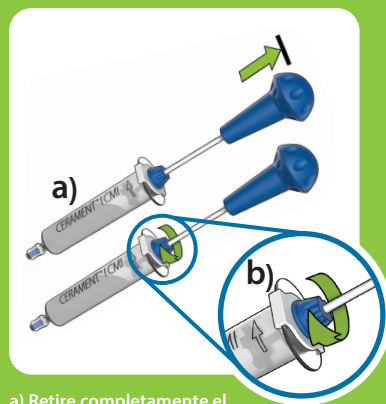


- a) Retire completamente el mango azul.
- b) Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

7

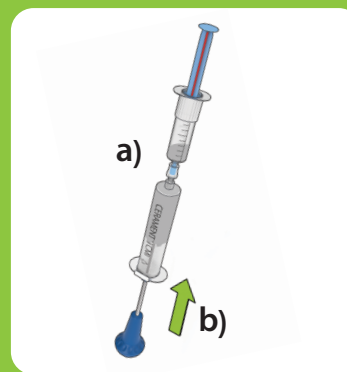

- a) Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
- b) Transfiera la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

8

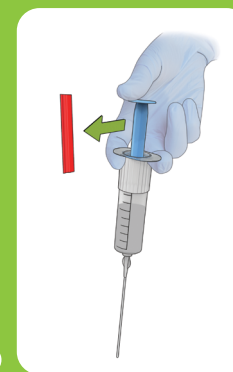

- Quite el tapón rojo y la pasta estará lista para usar después del tiempo de espera según el cronograma.

RECURSOS ADICIONALES:
Consulte aquí nuestro vídeo sobre mezclas:



BONESUPPORT™

bonesupport.com

PR 01469-01 es EU ROW US 04-2024