

CERAMENT® G



Número de artículo
5 ml A0535-02
10 ml A0535-01



MEZCLAR

30 s

Transfiera la pasta a la jeringa-ID

~ 1 min

ESPERAR

~ 4 min

INYECTAR

~ 7 min

AJUSTAR

~ 15 min

CIERRE DE LA HERIDA
BROCADO Y
COLOCACIÓN
DE TORNILLOS

Atención:


- No manipule el CERAMENT G inyectado.
- Consejo: Utilice una gasa y comprima entre 8 y 9 min. Esto debe hacerse de una vez y con firmeza.

1




- Quite la tapa del líquido de mezcla.
- Mantenga el vial estable.
- Empuje una de las agujas a través de la membrana del vial.

2

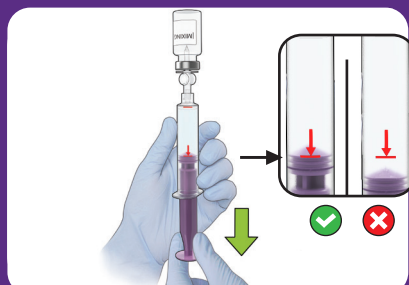

- Acople la jeringa púrpura a la aguja.
- Extraiga la solución salina solo hasta la marca roja de la jeringa; quedará solución salina en el vial de vidrio.
- Desconecte la jeringa llena de solución salina de la aguja.

3

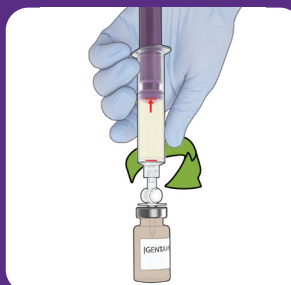


- Empuje la segunda aguja a través de la membrana del vial de gentamicina.
- Acople la jeringa llena de solución salina a la aguja.

4




- Transfiera todo el líquido al vial de gentamicina.
- Disuelva todo el polvo de gentamicina.

5

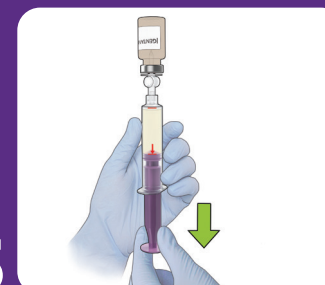


- Vuelva a introducir toda la solución de gentamicina en la jeringa. Esto puede requerir retirar ligeramente la aguja.

6

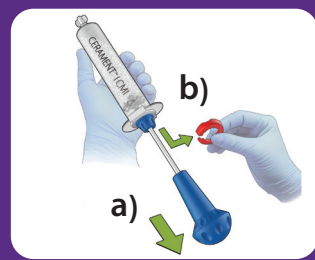


- Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

7

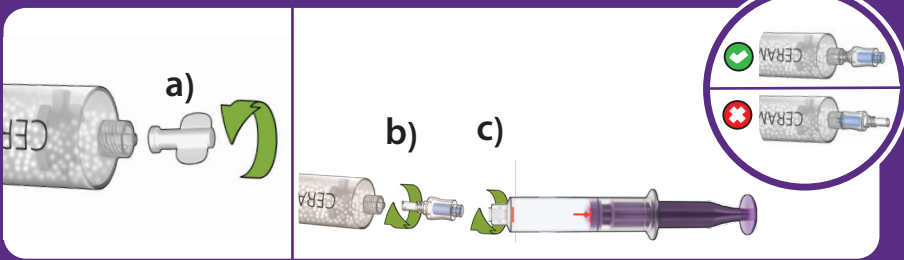


- b) Conecte la válvula con el extremo de la jeringa llena de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.
- c) Conecte la jeringa con solución de gentamicina al extremo azul de la válvula, presione y gire en el sentido de las agujas del reloj.

8

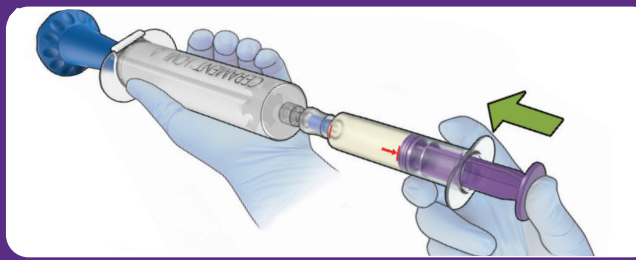


- Inyecte toda la solución de gentamicina en la jeringa con polvo.
- Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
- Desconecte la jeringa de la válvula.

9

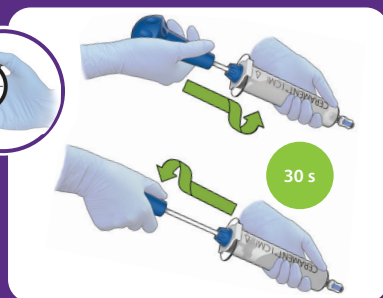


- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
- Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
- Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

10

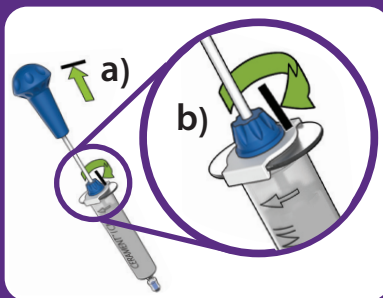


- a) Retire completamente el mango azul.
- b) Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

11

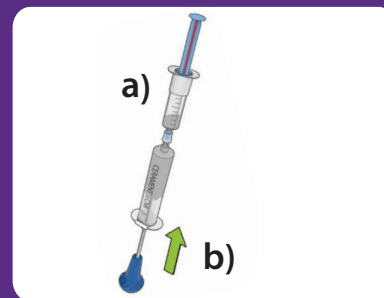

- a) Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
- b) Transfiera inmediatamente la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

12

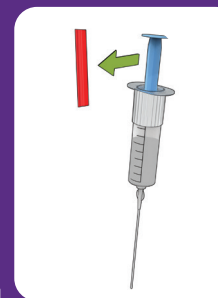

- Quite el tapón rojo y la pasta ya está lista para usar.

RECURSOS
ADICIONALES:
Consulte aquí
nuestro vídeo
sobre mezclas:



BONESUPPORT™

bonesupport.com

PR 01353-01 es EU ROW 04-2023