




CERAMENT® V

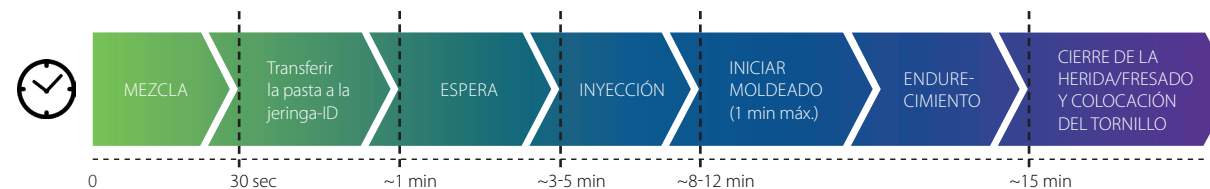


- 1
- a) Retire la tapa del vial de vancomicina.
- b) Empuje la aguja a través del vial de vancomicina.

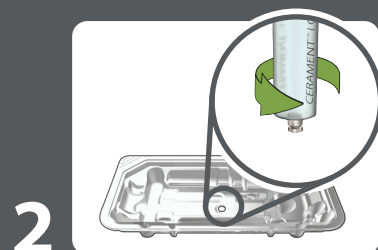


- 2
- Retire el tapón de la jeringa llena de líquido con la herramienta incrustada en el fondo de la bandeja del blister, empuje y gire en sentido contrario a las agujas del reloj.

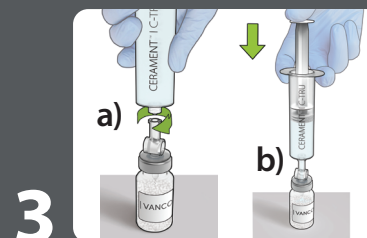


- 3
- a) Acople la jeringa a la aguja.
- b) Inyecte toda la solución en el vial.

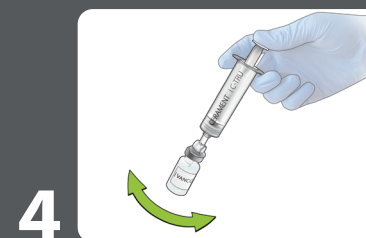


- 4
- Agite suavemente para disolver el polvo de vancomicina.

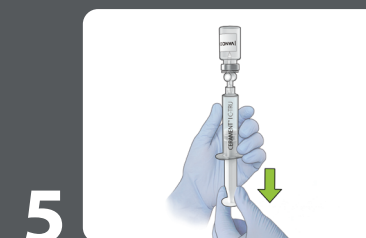


- 5
- Vuelva a introducir toda la solución de vancomicina en la jeringa. Para ello, puede ser necesario retirar ligeramente el pasador.

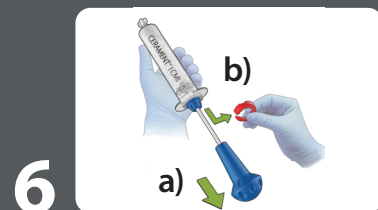


- 6
- a) Tire del mango azul y retire el anillo del freno del émbolo rojo.

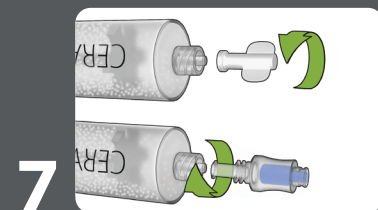


- 7
- Conecte la válvula con el extremo del dispositivo de mezcla lleno de polvo y gire en el sentido de las agujas del reloj.

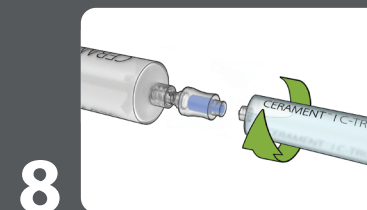


- 8
- Conecte la jeringa con solución de vancomicina al extremo azul de la válvula, presione y gire en el sentido de las agujas del reloj.

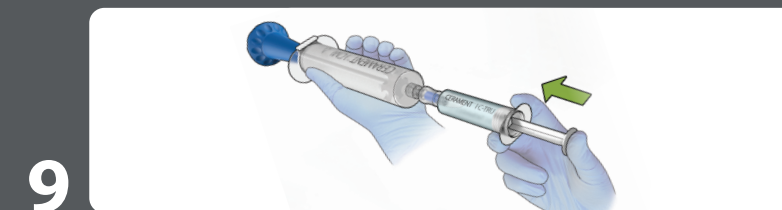


- 9
- Inyecte toda la solución de vancomicina en la jeringa con polvo.
- Mantenga el émbolo empujado hacia abajo para evitar que el líquido vuelva a fluir hacia atrás.
- Desconecte la jeringa de la válvula.

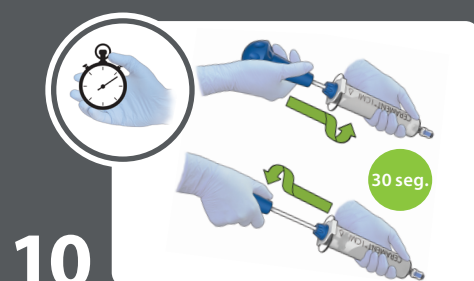


- 10
- Una vez inyectado el líquido, ponga en marcha inmediatamente el cronómetro.
- Mezcle por rotación durante 30 segundos, a 1 movimiento completo por segundo.
- Empuje el mango hasta el fondo, tire de ella hasta arriba y gírela en sus posiciones finales.

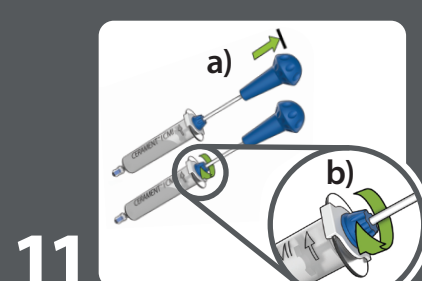

- 11
- a) Retire completamente el mango azul.
- b) Bloquee el émbolo girando la anilla de seguridad azul en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga un clic.

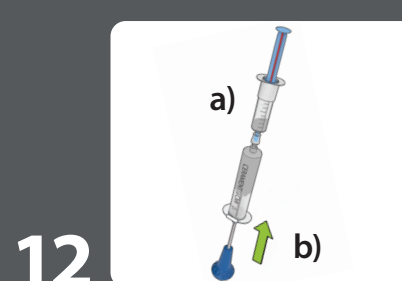

- 12
- a) Conecte la jeringa dispensadora a la válvula.
- b) Transfiera la pasta con los números mirando hacia el usuario. Cuando esté llena, la pasta comenzará a rebosar por debajo de la funda. Detenga el llenado cuando esto ocurra.

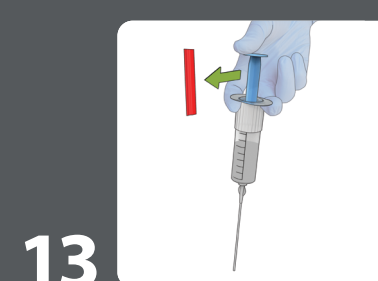

- 13
- Retire el tapón rojo y la pasta estará lista para usar después del tiempo de espera según la línea de tiempo.

RECURSOS ADICIONALES:
Consulte aquí nuestro video sobre mezclas:



BONESUPPORT™

bonesupport.com
PR 01458-02 es EU 05-2024